

20230612 SOP Hygiëne-en reinigingsprocedure reanimatiepoppen

Procedure AMTMS 20230612 - versie 2.00 - nog te valideren.

Hygiëne- en reinigingsprocedures voor reanimatiepoppen

Versie 1

Doelstelling

Met deze procedure verduidelijken we hoe we reanimatiepoppen correct dienen te reinigen, te ontsmetten of automatisch te reinigen.

Toepassing

Deze procedure is van toepassing op alle reanimatiepoppen die gebruikt worden door lesgevers en cursisten die opleidingen volgen of geven binnen AMT.

Definities

Reinigen = mechanisch ontdoen van zichtbare bevuilding: het aantal aanwezige micro-organismen wordt hierdoor verlaagd. Dit kan bijvoorbeeld met water en zeep, met detergent.

Desinfecteren- ontsmetten = handeling met tijdelijk effect die ongewenste micro-organismen verwijdert, doodt of hun werking stopt.

- Bijvoorbeeld desinfectie mond/ neus met Alcohol swabs 70%.

Het resultaat beperkt zich tot de aanwezige micro-organismen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

WIE?	WAT?
Voorzitter COPL	Eindverantwoordelijk voor de implementatie van deze procedure bij de verschillende commissies.
Coördinator opleidingen	Eindverantwoordelijk voor de implementatie van deze procedure bij de interne en freelance lesgevers.
Lesgevers	Correct reinigen en desinfecteren van reanimatiepoppen tijdens en na opleidingen.
Lesgevers	Kennen en volgen van de werkwijze.
Informatieplatform	Beheer van de procedure

Werkwijze

5.1 Gezichtshuid

Om de oefenpop in een schoon en hygiënische staat te houden, wordt het aanbevolen om voor elke student een apart Laerdal oefenpopgezicht te gebruiken. Binnen AMT wordt gekozen om te handelen volgens 5.1.1.

5.1.1 Schoonmaken tijdens de reanimatieles

Als meerdere cursisten één oefenpop gebruiken tijdens een reanimatietraining, reinigt u het oefenpopgezicht na elk gebruik grondig met alcohol swabs ontsmettings- en reinigingsdoekjes individueel verpakt.

5.1.2 Gebruik individuele alcohol swabs?

1. Folieverpakking openscheuren - eruit halen en openvouwen
2. Wrijf krachtig over de mond en neus van de oefenpop
3. Wikkel het doekje strak over mond en neus
4. 30 seconden laten zitten
5. Droog het gezicht van de pop met een schoon papieren doekje of iets dergelijks
6. De beademingsoefening kan nu worden voortgezet



Figuur 1: Mond + neus Schoonmaken tijdens de trainingssessie, na elke beademing.

5.2 Luchtweg

5.2.1 Schoonmaken na de reanimatieles


De luchtweg is bedoeld voor éénmalig gebruik en kan niet worden gereinigd.

Hij moet na één reanimatieles (trainingssessie) worden weggegooid als mond-op-mondbeademing is uitgevoerd.

Dit wordt ook aanbevolen als het Laerdal gelaatsscherm is gebruikt tijdens de reanimatietraining.

De longen hoeven niet tussen elke reanimatieles te worden vervangen als de student een persoonlijk Laerdal Zakmasker met een richtingsventiel en filter gebruikt of als de oefenpop een vervangbaar luchtwegfilter heeft waardoor de longen meerdere reanimatiesessies kunnen worden

gebruikt.

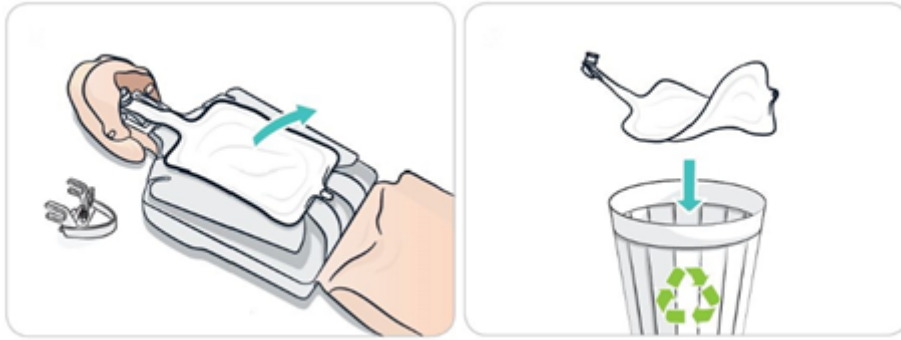


Figuur 2: Luchtweg + longen schoonmaken na de trainingssessie

Gezichtshuid


5.3.1 Reiniging na de reanimatieles

Na de reanimatieles kan de gezichtshuid met de hand worden gereinigd (dompel de gezichtshuid onder in water met reinigingsmiddel).

Verwijder het gezicht van de oefenpop en demonteer de gezichtsconnector van de gezichtshuid.

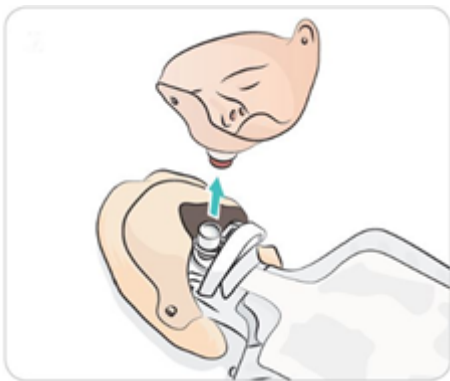

Figuur 3: de gezichtshuid losmaken van de reanimatiepop

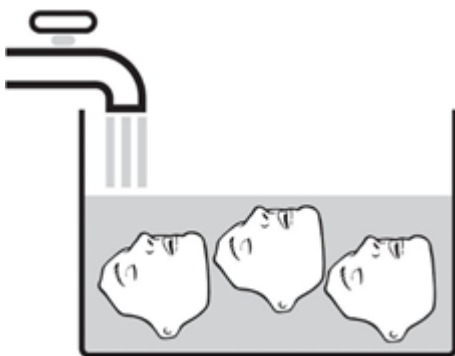

Figuur 4: de gezichtshuid 20. min onderdompelen in water met zeepoplossing.

5.3.2 Gebruik voor het reinigen een zeepoplossing.

1. Haal de gezichtsconnector los van de gezichtshuid
2. Dompel beide delen gedurende 20 minuten onder in water van 60-70 °C (140-158 °F) dat afwasmiddel bevat.
3. Reinig alle oppervlakken grondig en gebruik indien nodig een borstel
4. Spoel alle onderdelen af in water van 30 - 40 °C (86 - 104 °F) zonder afwasmiddel
5. Droog de onderdelen grondig

Als extra reiniging nodig is, gebruik dan een chemische oplossing. (alcohol 70%, individuele alcohol swabs)

5.3.3 Automatisch reinigen na een reanimatieles

Als je een wasmachine gebruikt, gebruik dan een van de onderstaande methoden.

Huishoudelijke vaatwasser

1. Koppel de gezichtsconnector los van de gezichtshuid
2. Gebruik een gewoon vaatwasmiddel (bijv. tablet/poeder)
3. Beide onderdelen kunnen worden gewassen in een huishoudelijke vaatwasser op 70 °C.

Dummyhuiden

Veeg de huid af met een vochtige doek om vlekken te verwijderen.

Huiden met elektroden of gelijmde patches mogen alleen worden gereinigd met een schone droge doek, omdat vocht de bevestigde onderdelen kan beschadigen.



Figuur 5: dummyhuid zonder elektroden of gelijmde patches

5.4.1 Gebruik voor het reinigen een Zeepoplossing.

Zeepoplossing

1. Huiddelen kunnen worden gereinigd met zeep en heet water
2. Veeg de huid af met een vochtige doek om vlekken te verwijderen
3. Veeg de huiddelen af met water zonder afwasmiddel bij 30 - 40 °C.
4. Droog de onderdelen grondig

Als extra reiniging nodig is, gebruik dan een chemische oplossing. (alcohol 70%, individuele alcohol swabs)

5.4.2 Harde plastic onderdelen

Veeg de onderdelen af met een vochtige doek om vlekken te verwijderen.

Onderdelen met elektroden mogen alleen worden gereinigd met een schone droge doek, omdat vocht de bevestigde onderdelen kan beschadigen.



Dummy kleding

De poppenkleding kan in de wasmachine gereinigd worden op 40 °C.

Zie het waslabel voor meer informatie.



Het stoffen lijfje van Baby Anne kan alleen worden gereinigd met een vochtige doek, indien nodig met een mild schoonmaakmiddel. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat het stoffen lijf niet wordt blootgesteld aan overmatig vocht, omdat dit door de stof kan dringen en de vulling van de pop kan doordrenken.

Tassen en trainingsmatten

Veeg de stof af met een vochtige doek om vlekken te verwijderen.



5.6.1 Gebruik voor het reinigen een Zeepoplossing.

Zeepoplossing

- “ 1. De stof kan worden gereinigd met zeep en warm water
2. Veeg de stof af met een vochtige doek om vlekken te verwijderen
3. Gebruik indien nodig een spons of borstel van melaminehars
4. Veeg de stof af in water zonder wasmiddel bij 30 - 40 °C.
5. Droog de onderdelen grondig

Elektronische onderdelen

Elektronica, zoals de QCPR sensor of printplaten in de oefenpoppen, mogen alleen worden gereinigd met een schone droge doek. Vocht kan het apparaat beschadigen.



Risico's

AMT zet in op duurzaamheid en kwaliteit. Bij het niet correct beheren en respecteren van de standaard hygiëne-en reinigingsprocedure zal duurzaamheid en kwaliteit in gedrang komen.

Bron

Laerdal standaard hygiëne- en reinigingsprocedures voor reanimatiepoppen.

[Klik hier](#) voor de procedure te raadplegen.

Revision #1

Created 2026-10-16 08:40:18 UTC by Raven Van Hove

Updated 2026-10-16 08:40:41 UTC by Raven Van Hove